

**21 - 22 SEPT.**  
**2017**

## AUDIT SUR LE CONTRÔLE DE FONCTIONNALITE DES CONTENEURS EN STERILISATION

*F.Nativel, M.Farny, L.Mehault, V.Guyot, A.L.Grall, L.Hamon*  
 Stérilisation, Pharmacie, CHU Pontchaillou – Rennes (France)

### INTRODUCTION-OBJECTIF

Le maintien de l'état stérile des dispositifs médicaux (DM), conditionnés en conteneurs dépend principalement de leur état et de leur fonctionnalité. Afin de réaliser un état des lieux de nos pratiques, un audit interne portant sur le contrôle de la fonctionnalité des conteneurs par les agents de stérilisation a été effectué lors de l'étape de conditionnement au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2016. Au vu des résultats un plan de formation a été organisé avant réalisation d'un 2<sup>ème</sup> audit au cours du 3<sup>ème</sup> trimestre 2016.

L'objectif principal était de sensibiliser les agents aux contrôles et d'améliorer les pratiques le cas échéant.

### MATERIELS-METHODES

Groupe de travail : pharmaciens, infirmières et agents de stérilisation

Référentiels : procédures de l'établissement et documents transmis par les fournisseurs

Agents audités : 20  
 Conteneurs étudiés : B Braun




Critères contrôlés: 18 répartis en trois groupes au regard du niveau de risque : critique (8), modéré (4) et mineur (6).

Cotation utilisée : 1 ou 0 associée à la réponse binaire (Oui ou Non)


Contrôle de fonctionnalité des conteneurs de stérilisation	OUI	NON	NC
La conformité de tous les rivets (intérieur et extérieur) est vérifiée			
Le(s) joint(s) du porte-filtre est(ont) vérifié(s)			
L'état des porte-étiquettes est contrôlé			
L'état des supports des plaquettes d'identification est contrôlé			

### RESULTATS


**Critères critiques**

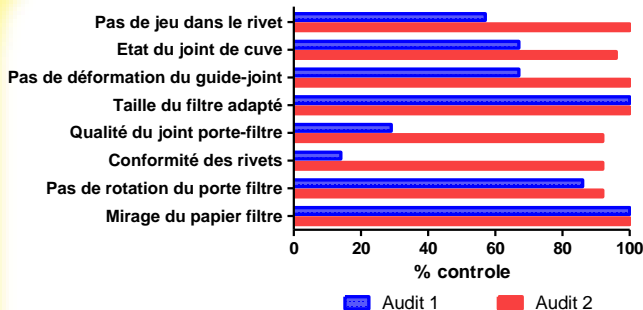

**Critères modérés**

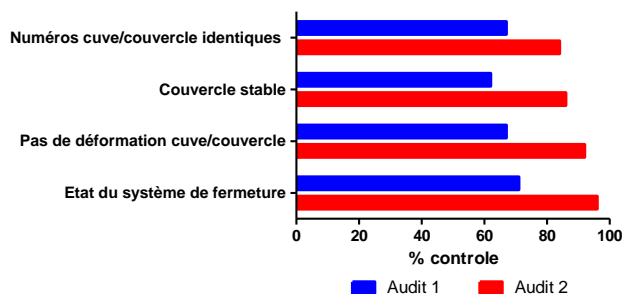

**Critères mineurs**

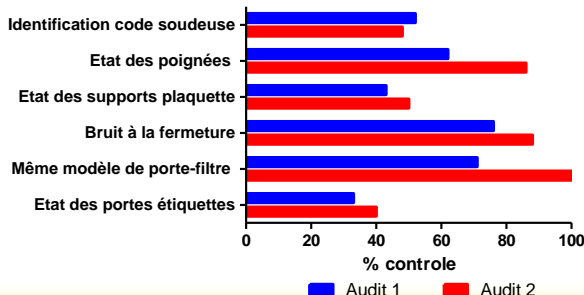

### DISCUSSION-CONCLUSION

Ces audits s'inscrivent dans une dynamique d'amélioration de la qualité du processus de stérilisation. Les résultats du premier audit ont montré une mauvaise application des procédures en vigueur alors que beaucoup d'agents pensaient connaître les consignes. L'équipe a parfaitement compris l'importance de ces contrôles qui garantissent l'étanchéité du conteneur et donc le maintien de l'état stérile. Une synthèse a été présentée à l'ensemble des agents de stérilisation et un mémo de poche a été élaboré et distribué. Le 2<sup>ème</sup> audit montre une nette amélioration des pratiques. Ce travail confirme l'intérêt majeur de ce type d'audits pour vérifier la conformité aux exigences et conforter et/ou améliorer les bonnes pratiques.